

Промышленные микроскопы

MEIJI TECHNO | Каталог



В Японии три основных производителя микроскопов, но только Meiji Techno производит исключительно микроскопы.

В 1964 году для производства микроскопов была основана компания Azuma Optics, которая быстро завоевала хорошую репутацию благодаря высокому качеству и быстрым срокам поставки продукции. В 1975 году компания была преобразована в Meiji Techno, которая начала предлагать на рынке микроскопы под маркой Meiji Techno.

Начав как производитель учебных микроскопов, компания Meiji Techno расширила ассортимент продукции до микроскопов, предназначенных для технологических работ и лабораторных исследований в медико-биологических и технических направлениях, включая образование. Продукция продается по всему миру — в Европе, Азии, Африке и Америке агентами или дистрибьюторами, авторизованными компанией Meiji Techno.

За многие годы компания Meiji Techno организовала представительства в разных частях мира (Америка, Великобритания, Европа, Россия и СНГ), а также построила широкую дилерскую сеть, которая объединяет высококвалифицированных специалистов, обладающих знанием и опытом во многих областях науки и техники.

Гарантия на механические части микроскопов — 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Вне зависимости от того, где вы находитесь и каковы ваши требования, продукция компании Meiji Techno и профессионализм наших специалистов помогут Вам достичь ваших целей в области микроскопических методов исследования.

MEIJITECHNO



Содержание

Стр.	Раздел
	Металлургические микроскопы
6–7	Серия МТ7000
8–9	Серия МТ7500
10–11	Серия МТ8000
12–13	Серия МТ8500
14–15	Серия ИМ7000
16–17	Серия ИМ7500
	Поляризационные микроскопы
20–21	Серия МТ9000
22–23	Серия МТ9900

Металлургические микроскопы

MT7500 / MT8000 / MT8500 /
IM7000 / IM7500



Серия MT7000

Универсальные, модульные, эргономичные металлургические микроскопы отраженного света для исследования в светлом поле.

Микроскопы серии MT7000 имеют прочный корпус с низкорасположенными коаксиальными рукоятками грубой/точной фокусировки, эргономичный столик для максимальной эффективности и удобства работы, а также чрезвычайно устойчивое основание.

Серия MT7000 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхгlossким полем зрения.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия — 1 год.

Характеристики

- Оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой F=200 мм
- Методы исследования и контрастирования: отраженный свет, светлое поле, поляризация
- Светлопольные безрефлексные объективы план ахромат Epi: 5×, 10×, 20×, 50×
- Сверхширокопольные окуляры 10× (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентофа)
- Эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым углом наклона окулярных трубок от 10° до 50° (опция)
- Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов с наклоном к штативу
- Столик координатный предметный 191×126 мм с керамическим покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления (право- или левосторонняя), перемещение 100×100 мм
- Осветитель отраженного света по Келлеру с галогеновым источником света (6 В, 30 Вт) или светодиодом, полевой ирисовой диафрагмой, апертурной диафрагмой и пазами для светофильтров
- Блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости, встроенный в основание микроскопа
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 23 мм



MT7000



MT7100

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT7000	Бинокуляр	SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм)	План ахромат Epi 5x, 10x, 20x, 50x	Предметный 191x126 мм	Вертикальный галогеновый 6 В, 30 Вт
MT7100	Тринокуляр				Светодиодный осветитель
MT7000L	Бинокуляр				
MT7100L	Тринокуляр				

Серия MT7500

Универсальные, модульные, эргономичные металлургические микроскопы отраженного света для исследования в светлом и темном поле.

Микроскопы серии MT7500 имеют прочный корпус с низкорасположенными коаксиальными рукоятками грубой/точной фокусировки, эргономичный столик для максимальной эффективности и удобства работы, а также чрезвычайно устойчивое основание.

Серия MT7500 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхгlossким полем зрения.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия — 1 год.

Характеристики

- Оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой $F=200$ мм
- Методы исследования и контрастирования: отраженный свет, светлое поле, темное поле, поляризация
- Безрефлексные объективы план ахромат Epi светлого/темного поля: BD5x, BD10x, BD20x, BD50x
- Сверхширокопольные окуляры 10x (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентофа)
- Эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым углом наклона окулярных трубок от 10° до 50° (опция)
- Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов
- Столик координатный предметный 191×126 мм с керамическим покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления (право- или левосторонняя), перемещение 100×100 мм
- Осветитель отраженного света по Келлеру с галогеновым источником света (12 В, 50 Вт) или светодиодом, полевой ирисовой диафрагмой, апертурной диафрагмой и пазами для светофильтров
- Блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости, встроенный в основание микроскопа
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 23 мм



MT7520



MT7530

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT7520	Бинокуляр	SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм)	План ахромат Epi BD5x, BD10x, BD20x, BD50x	Предметный 191x126 мм	Вертикальный галогеновый 12 В, 50 Вт осветитель по Келлеру
MT7530	Тринокуляр				
MT7520L	Бинокуляр				Светодиодный осветитель
MT7530L	Тринокуляр				

Серия MT8000

Универсальные, модульные, эргономичные металлургические микроскопы отраженного и проходящего света для исследования в светлом поле.

Серия MT8000 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Микроскопы проходящего и отраженного света серии MT8000 имеют прочный штатив с низкорасположенными коаксиальными рукоятками грубой/точной фокусировки
- Оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой F=200 мм
- Методы исследования и контрастирования: проходящий свет светлое поле, отраженный свет светлое поле, поляризация
- Светлопольные безрефлексные объективы план ахромат Epi: 5×, 10×, 20×, 50×
- Сверхширокопольные окуляры 10× (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентофа)
- Эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым углом наклона окулярных трубок от 10° до 50° (опция)
- Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов с наклоном к штативу
- Столик координатный предметный 191×126 мм с керамическим покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления (право- или левосторонняя), перемещение 100×100 мм
- Осветитель отраженного света по Келлеру с галогеновым источником света (6 В, 30 Вт) или светодиодом, полевой ирисовой диафрагмой, апертурной диафрагмой и пазами для светофильтров
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 23 мм
- Различные адаптеры для видеокамер CCD/CMOS, цифровых фотокамер



MT8000



MT8100

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT8000	Бинокуляр	SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм)	План ахромат Epi 5x, 10x, 20x, 50x	Предметный 191x126 мм	Галогеновые 6В, 30Вт осветители по Келеру
MT8100	Тринокуляр				
MT8000L	Бинокуляр				Светодиодные осветители
MT8100L	Тринокуляр				

Серия MT8500

Универсальные, модульные, эргономичные металлургические микроскопы отраженного и проходящего света для исследования в светлом и темном поле.

Серия MT8500 предлагает широкий набор возможностей и отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой F=200 мм
- Методы исследования и контрастирования: проходящий свет светлое поле, отраженный свет светлое поле, темное поле, поляризация
- Безрефлексные объективы план ахромат Epi светлого/темного поля: BD5x, BD10x, BD20x, BD50x
- Сверхширокопольные окуляры 10x (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентофа)
- Эргономичная бинокулярная насадка с регулируемым углом наклона окулярных трубок от 10° до 50° (опция)
- Эргономичный револьвер для крепления 5 объективов
- Столик координатный предметный 191×126 мм с керамическим покрытием, с эргономичной коаксиальной рукояткой управления (право- или левосторонняя), перемещение 100×100 мм
- Осветитель отраженного света по Келлеру с галогеновым источником света (12 В, 50 Вт) или светодиодом, полевой ирисовой диафрагмой, апертурной диафрагмой и пазами для светофильтров, блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости (стационарный)
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 23 мм, настройка точной фокусировки: 0,2 мм за один оборот
- Различные адаптеры для видеокамер CCD/CMOS и цифровых фотокамер



MT8520



MT8530

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT8520	Бинокляр	SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм)	План ахромат для эпи- флуоресценции 5x, 10x, 20x, 50x	Предметный с препаратодержателем на 2 препарата (R) 191x126 mm	Галогеновые осветители по Келлеру, отраженный свет 12 В, 50 Вт, проходящий свет 6 В, 30 Вт
MT8530	Тринокляр				
MT8520L	Бинокляр				Светодиодные осветители
MT8530L	Тринокляр				

Серия IM7000

Инвертированные металлургические микроскопы Meiji Techno серии IM7000 с утонченным дизайном экономят место на вашем столе и при этом чрезвычайно устойчивы. Эргономичное расположение всех регуляторов IM7000 исключает усталость оператора при длительной работе с микроскопом. Интегрированный вертикальный галогеновый осветитель 6 В, 30 Вт по Келлеру или светодиод. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа.

Микроскопы серии IM7000 предназначены для решения широкого круга исследовательских задач. Они отлично подходят для исследования металлургических препаратов и для рутинного контроля качества, например, для анализа микроструктур, тестирования различных материалов и микрофотографии. Серия IM7000 имеет отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»).

Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения. Встроенный фотовыход на передней панели обеспечивает простоту и удобство документации изображений. Методы работы включают светлое поле и поляризацию.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Новая усовершенствованная ICOS — оптика (оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой F=200 мм)
- Безрефлексные объективы план ахромат Epi: 5x, 10x, 20x, 50x
- Сверхширокопольные окуляры 10x (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентопфа)
- Столик предметный 180x245 мм с керамическим покрытием
- Осветитель отраженного света, галогеновая лампа (6 В, 30 Вт) или светодиод
- Фото-/видеовыход во фронтальной части основания
- Фото- и видео-документирование



IM7100



IM7200

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
IM7100	Бинокуляр	SWH10× F.N. 22	План ахромат Ерi: 5×, 10×, 20×, 50×	Плоский столик с керамическим покрытием 180×245 мм	Вертикальный галогеновый 6 В, 30 Вт осветитель по Келлеру
IM7200	Тринокуляр				

Серия IM7500

Инвертированные металлургические микроскопы Meiji Techno серии IM7500 с утонченным дизайном экономят место на вашем столе и при этом чрезвычайно устойчивы. Эргономичное расположение всех регуляторов IM7500 исключает усталость оператора при длительной работе с микроскопом. Интегрированный вертикальный галогеновый осветитель 12 В, 50 Вт по Келлеру. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа.


Микроскопы серии IM7500 предназначены для решения широкого круга исследовательских задач. Они отлично подходят для исследования металлургических препаратов и для рутинного контроля качества, например, для анализа микроструктур, тестирования различных материалов и микрофотографии. Серия IM7500 имеет отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOS™ (скорректированной «на бесконечность»).

Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения. Встроенный фотовыход на передней панели обеспечивает простоту и удобство документации изображений. Методы работы включают светлое поле, темное поле и поляризацию.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Новая усовершенствованная ICOS — оптика (оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность», с тубусной системой F=200 мм)
- Объективы безрефлексные план ахромат Epi: BD5×, BD10×, BD20×, BD50×
- Сверхширокопольные окуляры 10× (для работы в очках), линейное поле — 22 мм
- Удобные бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентопфа)
- Столик предметный 240×184 мм с керамическим покрытием
- Осветитель отраженного света, галогеновая лампа (12 В, 50 Вт) или светодиод
- Фото-/видеовыход во фронтальной части основания
- Фото- и видео-документирование

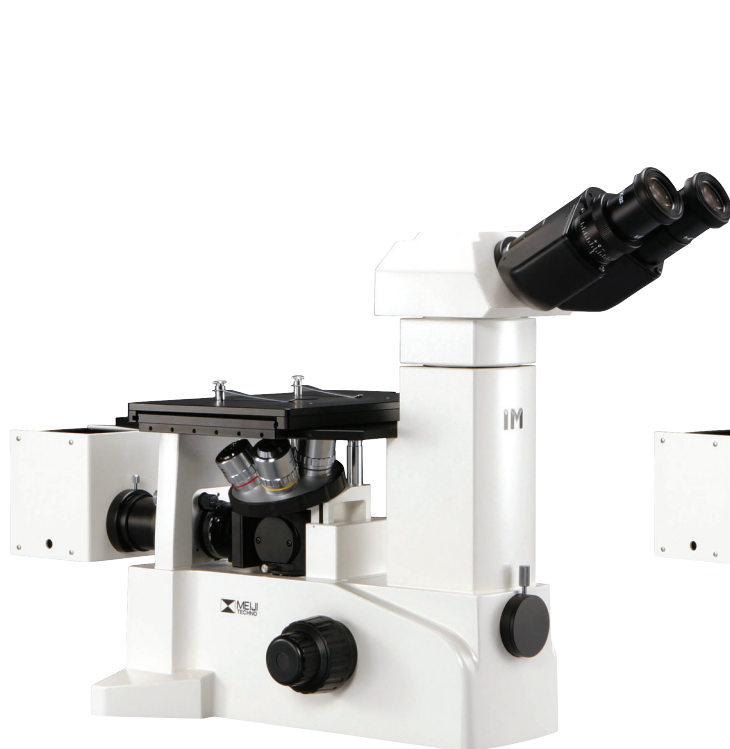

IM7520



IM7530

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
IM7520	Бинокуляр	SWH10× F.N. 22	План ахромат Epi BD E5x, BD E10x, BD E20x	Плоский столик с керамическим покрытием 224 x 184 мм	Вертикальный галогеновый 12 В, 50 Вт осветитель по Келлеру
IM7530	Тринокуляр				

Поляризационные микроскопы

MT9000 / MT9900



Серия MT9000

Гибкие, модульные, эргономичные поляризационные микроскопы Meiji Techno проходящего и отраженного света для поляризации и исследований в светлом поле.

Серия включает новую усовершенствованную оптику с отсутствием внутреннего напряжения Strain Free Planachromat ICOS™ «на бесконечность», большой круглый столик с керамическим покрытием, стойким к износу и царапинам, прочный и устойчивый корпус с небольшой площадью основания для экономии вашего рабочего места. Превосходные микроскопы для геологии, петрологии, минералогии, судебной медицины, естественных наук, производства, кристаллографии, медицинских исследований, исследований окружающей среды, контроля качества и обеспечения контроля в промышленности.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Прочный и устойчивый штатив с небольшой площадью основания для экономии рабочего места
- Новая усовершенствованная поляризационная Strain Free ICOS — оптика (оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность» и без внутренних напряжений)
- Поляризационные Strain Free план ахромат объективы: 4х, 10х, 40х (стандартная комплектация), 20х, 60х, 100х (опция)
- Окуляр: KHW10х линейное поле — 20 мм (посадочный диаметр — 23,2 мм), левый — с диоптрийной настройкой и направляющей для установки в окулярную трубку с фиксацией, с ориентированным перекрестием, правый — стандартный
- Визуальные насадки: бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентофа) с углом наклона окулярных трубок 30°, фиксатором для окуляра в левой окулярной трубке
- Настройка межзрачкового расстояния 53–75 мм
- Эргономичный револьвер для крепления 4 объективов с наклоном к штативу, 3 гнезда с возможностью центрировки поляризационных объективов, 1 гнездо — без центрировки, два винта для центрирования объективов
- Ортоскопический/коноскопический модуль для проходящего света с анализатором в слайдере, линзой Бертрана и слотом для компенсаторов (мод. MT9200, MT9300)
- Вращающийся поляризатор в слайдере с градуировкой от 0° до 90°
- Круглый вращающийся предметный столик диаметром 175 мм с керамическим покрытием, с градуировкой 360° и шагом в 1°, нониусной линейкой до 0,1° и двумя зажимами для препарата. Дополнительные принадлежности включают: механический держатель и координатный препаратодержатель
- Центрируемый конденсор Аббе поляризационный (без внутренних напряжений), N.A.=1,25, ирисовая апертурная диафрагма, крепление «ласточкин хвост»
- Осветитель проходящего света по Келлеру (мод. MT9200, MT9300) с галогеновым источником света (6 В, 30 Вт), блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 25 мм, настройка точной фокусировки: 0,2 мм за один оборот.
- Различные адаптеры для камер CCD/CMOS и цифровых фотокамер



MT9200L



MT9300L

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT9200L	Бинокуляр	KNW10× F.N. 20 (O.D. 23,2 мм)	Strain Free план ахромат 4×, 10×, 40×	Вращаемый круглый столик с градуировкой 360°, с нониусной линейкой	Светодиодный осветитель проходящего света
MT9300L	Тринокуляр				

Серия MT9900

Гибкие, модульные, эргономичные поляризационные микроскопы Meiji Techno проходящего и отраженного света для поляризации и исследований в светлом поле.

Серия включает новую усовершенствованную оптику с отсутствием внутренних напряжения Strain Free Planachromat ICOS™ «на бесконечность», большой круглый столик с керамическим покрытием, стойким к износу и царапинам, прочный и устойчивый корпус с небольшой площадью основания для экономии вашего рабочего места. Превосходные микроскопы для геологии, петрологии, минералогии, судебной медицины, естественных наук, производства, кристаллографии, медицинских исследований, исследований окружающей среды, контроля качества и обеспечения контроля в промышленности.

Благодаря модульному дизайну можно с легкостью добавлять к микроскопу различные принадлежности, включая видеокамеры CCD/CMOS, цифровые фотокамеры.

Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Характеристики

- Прочный и устойчивый штатив с небольшой площадью основания для экономии рабочего места
- Новая усовершенствованная поляризационная Strain Free ICOS — оптика (оптическая система микроскопа, скорректированная на «бесконечность» и без внутренних напряжений)
- Поляризационные Strain Free план ахромат объективы: 4x, 10x, 40x (стандартная комплектация), 20x, 60x, 100x (опция)
- Окуляры: KHW10x линейное поле — 20 мм (посадочный диаметр — 23,2 мм), левый — с диоптрийной настройкой и направляющей для установки в окулярную трубку с фиксацией, с ориентированным перекрестием, правый — стандартный
- Визуальные насадки: бинокулярные насадки без и с фото-/видеовыходом (призмные системы типа Зидентопфа) с углом наклона окулярных трубок 30°, фиксатором для окуляра в левой окулярной трубке
- Настройка межзрачкового расстояния 53–75 мм
- Эргономичный револьвер для крепления 4 объективов с наклоном к штативу, 3 гнезда с возможностью центрировки поляризационных объективов, 1 гнездо — без центрировки, два винта для центрирования объективов
- Ортоскопический/коноскопический модуль с вращаемым анализатором, фокусируемой и центрируемой линзой Бертрана и слотом для компенсаторов (для установки слайдера для красной пластины первого порядка и пластины в 1/4 волны или опционального кварцевого клина и компенсатора Сенармона). (мод. MT9920, MT9930)
- Вращающийся поляризатор в слайдере с градуировкой от 0° до 90°
- Круглый вращающийся предметный столик диаметром 175 мм с керамическим покрытием, с градуировкой 360° и шагом в 1°, нониусной линейкой до 0,1° и двумя зажимами для препарата.
- Центрируемый конденсор Аббе поляризационный (без внутренних напряжений), N.A.=0,9 с линзой Лазо, ирисовая апертурная диафрагма, крепление «ласточкин хвост»
- Осветитель отраженного света по Келлеру (мод. MT9930) с галогеновым источником света (6 В, 30 Вт) или светодиодом, блок питания с автоматическим определением напряжения и регулировкой яркости расположен автономно
- Осветитель проходящего света по Келлеру (мод. MT9920, MT9930) с галогеновым источником света (6 В, 30 Вт) или светодиодом, блок питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа
- Низкорасположенные эргономичные коаксиальные рукоятки механизма грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода, диапазон перемещения: 25 мм, настройка точной фокусировки: 0,2 мм за один оборот.
- Различные адаптеры для камер CCD/CMOS, цифровых фотокамер для фото- и видео-документирования



MT9920



MT9930

Таблица сравнения

Модель	Оптическая насадка	Окуляры	Объективы	Столик	Осветитель
MT9920	Бинокуляр	KNW10× F.N. 20 (O.D. 23,2 мм)	Strain Free план ахромат 4×, 10×, 40×	Вращаемый круглый столик с градуировкой 360°, с нониусной линейкой	Галогеновые 6 В, 30 Вт осветители проходящего света по Келлеру
MT9930	Тринокуляр				Светодиодные осветители
MT9920L	Бинокуляр				
MT9930L	Тринокуляр				

MEIJITECHNO



MEIJI TECHNO CO., LTD.

322-1, Chikumazawa Miyoshi machi,
Iruma-gun Saitama 354-0043, Japan
tel.: (0)49-259-0111
fax: (0)49-259-0113
meiji@meijitechno.co.jp
www.meijitechno.co.jp



MEIJI TECHNO AMERICA

591 Division St., Campbell CA 95008
Toll free USA: 800-832-0060
tel.: 408-226-3454
fax: 408-226-0900
admin@meijitechno.com
www.meijitechno.com



MEIJI TECHNO EUROPE

Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465
fax: +43 (0) 2236 892464
info@meijitechno-europe.com
www.meijitechno-europe.com

| www.meijitechno.com |

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Официальный дистрибьютер

Rev 1.0_07.2026 CIS

